



Výrobce/Výrobca/Producent: Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 499 599 577, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl

SYSTEMAT



SONISSIMO NEO
EL36181/EL36182/EL36183/EL36184

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie
 PL -Sposób użycia

CZ - Blahopřejeme Vám ke správné volbě tohoto výrobku. NEO dentální sonické centrum patří k absolutní špičce na světovém trhu v oblasti šetrné péče o zuby.

Došáhnete doma pocitu profesionálně čistých zubů pomocí akumulátorového dentálního sonického centra. Pomocí NEO dentálního sonického centra docílíte i DOMA POCITU PROFESIONÁLNĚ ČISTÝCH ZUBŮ.

Zažijte při odchodu z koupelny pocit, jako byste právě odešli od zubního lékaře. Zjistíte, jak je snadné čistit si zuby se sonickým zubním kartáčkem a proč nabízí tak vysokou účinnost.

Kartáčková hlava a vysoké frekvenční pohyby vyčistí vaše zuby šetrně a účinně. Odstraní zubní povlak v mnohem větší míře než obyčejný manuální zubní kartáček. Na kartáček není potřeba příliš tlačit. Nechte sonické dentální centrum pracovat jednoduše za vás.

Pro nejlepší výsledky prosím nezapomeňte si čistit zuby dvakrát denně po dobu dvou minut. Zubní kartáček zapněte až ve chvíli, kdy se dotýká vašich zubů. Zabráníte tím rozstříknutí vody a pasty po okolí.

Varování:

- Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnut drobných částí.
- Obal i upevňovací prvky nejsou součástí přístroje. Před prvním použitím přístroje je odstraňte.
- Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.
- Pravidelně kontrolujte, zda není přírodní kabel poškozen. Pokud zjistíte poškození přírodní šňůry, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Poškozený nebo nefunkční produkt se nesmí dále používat. Neopravujte ani nemodifikujte tento produkt. Váš zásah může způsobit požár, zranění nebo poranění elektrickým proudem.
- Tento produkt není určen pro děti mladší než 3 roky. Děti ve věku 3-14 let, lidé se sníženými psychickými, fyzickými, senzorickými schopnostmi nebo lidé bez zkušeností a znalostí by měli být před použitím tohoto produktu proškoleni a měli by být pod dozorem dospělé proškolené osoby.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi.
- Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby se s tímto produktem hrály.
- Tento produkt používejte pouze k činnosti, pro kterou byl navržen a dle návodu k použití.
- Nepoužívejte nástavce (čisticí hlavice), které nejsou doporučeny výrobcem.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud vám přístroj upadne, před dalším vyměňte čisticí hlavici. A to i v případě, že na ní není žádné viditelné poškození.
- Dobíjecí podložku ani kabel neponořujte do vody. Nesklopujte v blízkosti vody, nebo kde hrozí upadnutí kterékoli části do vody. Pokud vám kterákoliv část dobíjecího stojáku, (včetně zástrčky a kabelu) upadne do vody, nesahejte pro ni, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě stávajících problémů se zuby konzultujte používání toho kartáčku se svým dentistou.
- Udržujte tento produkt v čistotě. Zabráňte kontaktu s různými chemikáliemi jako např. oleje, gely, čisticí prostředky, atd. Nemýjte v myčce na nádobí.
- **Čisticí hlavici doporučujeme měnit každé 2 měsíce.**

Popis produktu:

- Vyměnitelná čisticí hlavice
- Tělo kartáčku
- Indikátor nabíjení baterie
- Dobíjecí podstavec
- USB dobíjecí kabel

Technické parametry:	
Spotřeba	1,5 W
Doba nabíjení baterie	8-10 hod při úplném vybití
Napětí	AC 100 V- 240 V 50 Hz
IP krytí	IPX7

Použití:

Váš zubní kartáček má voděodolnou rukojeť a je svým designem přizpůsoben k použití v koupelně.

- Vyměnitelnou čisticí hlavici jemně nasadte na sonickou hřídelku. Mezi hřídelkou a tělem kartáčku musí zůstat malá mezera. Toto je normální pro proces čištění zubů. **Obr.1**
- Zubní kartáček zapněte až ve chvíli, kdy se dotýká vašich zubů. Zabráníte tím rozstříknutí vody a pasty po okolí. **Obr.2**
- Při čištění zubů dodržujte sklon mezi hlavou kartáčku a linií dásní 45°. **Obr.3**
- Kartáček držte jemně, neplaťte a pomalu jím pohybujte kruhovými pohyby v dutině ústní
- Po každém použití kartáček vypněte, oddělte čisticí hlavu a důkladně ji propláchněte v proudu tekoucí vody.

Nabíjení:

- Zastrčte volný konec USB kabelu do zástrčky nebo jiného vhodného zdroje. Zástrčku zasuněte do zásuvky. Adaptér není součástí balení.
- Kartáček postavte na dobíjecí podložku tak, aby vždy bílá strana podložky směřovala vzhůru. Kartáček postavte na nabíjecí podložku.
- Blikající modrý symbol baterie indikuje, že proces dobíjení začal a pokračuje. Po úplném dobití kartáčku zůstane indikátor permanentně rozsvícen. V případě, že je kartáček zcela vybit, může chvíli trvat než se světelný indikátor, po připojení do el. sítě, opět rozblíká.
- Po udržení maximální kapacity baterie doporučujeme nechat baterii jednou za 6 měsíců zcela vybit a znovu nabít v dobíjecí kolébce.

Volba programů:


Pro změnu volby programů zmáčkněte krátce hlavní vypínač na těle kartáčku. Mačkejte tak dlouho, dokud se název vámi zvoleného programu na rukojeti nerozsvítí:

- 1 Červený režim** – bělení zubů (s použitím správně zvolené zubní pasty)
- 2 Zelený režim** – intenzivní čištění a leštění zubů
- 3 Modrý režim** – šetrný režim určený pro citlivé zuby nebo části úst
- 4 Žlutý režim** – běžný režim čištění zdravých zubů
- 5 Fialový režim** – pulzační režim pro masírování dásní

Každý program je rozdělen na čtyři 30-ikvteřinové fáze (chytrá a praktická pomůcka pro vás).

2 minuty = 4 fáze.

- Fáze 1** je pro **VNĚJŠÍ** část **HORNÍ** čelisti
- Fáze 2** je pro **VNITŘNÍ** část **HORNÍ** čelisti
- Fáze 3** je pro **VNĚJŠÍ** část **DOLNÍ** čelisti
- Fáze 4** je pro **VNITŘNÍ** část **DOLNÍ** čelisti

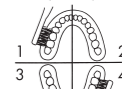


V průběhu dvouminutového programu se po každé fázi (30 vteřin) chod strojek 2X krátce přeruší (2 pulzy), čímž vám dává jasný signál pro postup na další část zubů. Jednoduše a chytře vám tak napovídá, jak si zuby vyčistíte efektivně a při dodržení optimálního času pro každou část zubů.

Obr.1



Obr.2

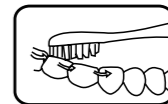

Obr.3

